

لقد تزايدت مشكلة قمل الرأس منذ تسعينيات القرن الماضي. واليوم يصاب به الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و11 عاما في المقام الأول. إن أكبر المشاكل مع القمل تلاحظ عادة عند بدء الفصل الدراسي الجديد في المدارس والحضانات. فالقمل ينمو على مقربة من فروة الرأس، ولا يستطيع القفز أو الطيران. لذا فإن التلامس القريب مطلوب أي رأس قرب رأس حتى يتمكن القمل من الزحف وإصابة شخص آخر. وحيث أن معظم الأطفال والبالغين اليوم لديهم مناطق اتصال وتلامس كبيرة ويقابلون الكثير من الأشخاص، فإن مخاطر انتشار القمل زادت. إن قمل الرأس مشكلة متزايدة ليس فقط ضمن الأطفال فحسب ولكن يمتد تأثيرها للأسر بأسرها حيث أن القمل ينتشر بسهولة لجميع أفراد الأسرة قبل اكتشاف المشكلة وعلاجها.

لم يتعين عليّ استخدام NitFree؟

معظم المنتجات الموجودة اليوم في الأسواق هي في الأصل لمكافحة القمل ولكنها ليست دائما على نفس القدر من الفعالية في التخلص من الصنبان (البيض). وهذا يعني أن الكثير من العلاجات تتضمن مراحل علاج عدة يجب أن تجرى على فترة زمنية أطول. إن استخدام NitFree الذي يجذب إليه البيض والقمل في ذات الوقت، يقطع دورة الحياة البيولوجية للقمل، فلا يملك البيض فرصة للفقس مما يعني أن القمل لن يستطيع التكاثر، وبالتالي يمكن أن تُختصر مدة العلاج إلى حد كبير.

تبرز وكالة المنتجات الطبية أهمية تمشيط الشعر بمشط ذي أسنان رقيقة لعلاج القمل. وقد أظهرت دراسة بريطانية نُشرت في المجلة الطبية البريطانية أن تمشيط الشعر يمكن أن يكون أكثر فعالية من مجرد استخدام العلاجات المتاحة بدون وصفة طبية وذلك بمقدار أربعة أضعاف. إن ما يميز NitFree عن غيره من الأمشاط هو الأسنان المثلمة المكروية والمسجلة ببراءة اختراع مما يعني أنه يمكن التخلص من كل من البيض والقمل في آن واحد. باستخدام مشط القمل التقليدي يصعب كثيرا فك البيض من جداول الشعر العالقة به عن طريق إفراز يشبه الصمغ. إن المسافة التي تبعد بين أسنان مشط NitFree هي أقل من 0.2 مم، مما يعني التمكن من التخلص من حتى أصغر القمل والبيض حجما.

NitFree مصنوع من الفولاذ (استانلس ستيل). إنه متين ومقاوم للتآكل ويمكن أن يتعرض للعلاجات الكيميائية للقمل دون أن يلحق الضرر. إن شكله ومظهره لا يتغيران بالاستخدام المتكرر حيث أن NitFree مصمم بشكل بالغ الدقة باستخدام تكنولوجيا الليزر. يمكن تعقيم المشط واستخدامه من قبل جميع أفراد الأسرة دون المخاطرة بمزيد من الانتشار.

وفي الآونة الأخيرة أظهرت التقارير أن استخدام العلاجات الكيميائية أدت إلى وجود سلالات مقاومة من القمل، أما التمشيط باستخدام NitFree فإنه لا يسبب ذلك أبدا.

المفاهيم الفريدة التي تقوم عليها NitFree

متين ويمكن تعقيمه

مصنوع من الفولاذ (استانلس ستيل). متين ومقاوم للتآكل.

شرايط مطاطية لمسكة أفضل

فالمشط لا ينزلق حتى إذا كانت يداك مبللتين أو مكسوتين بالصابون.

اسنان مشط طويلة

مما يضمن وصولا أفضل. يمكن التخلص من المزيد من القمل والبيض بكل حركة من المشط في الشعر.

اسنان المشط قريبة من بعضها البعض

حتى أصغر القمل والبيض حجما يمكن التخلص منها عند التمشيط.



ثلثات دقيقة فريدة

يتم انتزاع البيض من الشعر وإتلافه في نفس الوقت. إن التصميم بالغ الدقة للثلثات المكروية والنهايات المنحنية تعني أن لا الشعر ولا فروة الرأس يصيبهما ضرر أثناء التمشيط.


رأي الزبائن في NitFree

"لقد كنا نحارب القمل منذ أشهر عديدة - دون جدوى... إلى أن (باعتباري بائعة وموظفة تسويق) قرأت المدح، قلت لنفسي "لنجرب ونرى!" أستطيع أن أقول من واقع تجربتي أنها كانت تجربة ناجحة! لقد مشطنا ومشطنا ومشطنا! والآن تخلصنا من كل البيض الذي كنا نبحث عنه من قبل بكل همة ونحاول التقاطه بالملقط. كل هذا بحركة واحدة من المشط في الشعر. إذا كنت تجلس وتقرأ هذا الكلام ولا تملك هذا المشط، فإني أقدم توصياتي الحارة بشراء هذا المشط!"
صوفي، أم لطفلين "شعرهما كثيف"

"مرحبا، أردت أن أكتب لأشكركم على هذا المشط الرائع! بعد أسبوعين تقريبا من استخدام مشطكم أصبحنا جميعا خاليين من القمل. لقد ساورني الشك في البداية حول ما إذا كان المشط سيؤدي وظيفته بنجاح في الشعر الأفرو فأثبت لي نجاحه. أكاد أعتقد أن Nitfree أفضل للاستخدام كذلك من أمشاط فك الشعر التي نستخدمها عادة!"
تانيا، أم لطفلين - شعرهم جميعا أفرو

"تخلصنا من القمل في 3 أيام وأوقفنا استخدام العلاجات الخاصة بالقمل. نحن راضون عن المشط. إنه لشيء رائع أن يوجد لدينا دائما حل لهذه المشكلة في المنزل!"

بير، أب لثلاثة أطفال

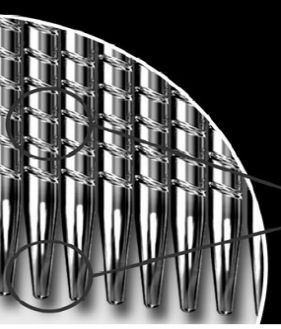

قمل الرأس

انضم إلى 'LusFri.nu'

خذ زمام الأمور بيدك – تخلص من القمل بسرعة وذلك
بأن تبدأ بـ



البيض.

NitFree – مشط القمل بثلمات مكروية فريدة تزيل البيض والقمل
معا.

ثمنه معقول ومتين. يوصى به لمن يعانون من أمراض الحساسية.

طريقة استخدام NitFree

استخدم NitFree في الحمام حتى يمكنك ويكل سهولة تنظيف المشط
تحت ماء جار بعد كل حركة من المشط في الشعر.

1 حافظ على جفاف الشعر أو رطبه قليلا للإقلال من
تأثير الكهرباء الساكنة

2 استخدم مشطا عاديا أو فرشاة لفك خصلات الشعر
المتشابكة وإزالة أي تعقيدات في الشعر.

3 قسم الشعر إلى أقسام صغيرة واستخدم NitFree
للتمشيط بعناية في كل قسم من الشعر. انظر إلى ما
يخرج بعد كل حركة من المشط في الشعر. يمكنك
الرؤية بشكل أفضل إذا قمت بهز المشط فوق قطعة
ورقية بيضاء اللون أو مرآة. إنه من المهم التمشيط
بالقرب من فروة الرأس كلما أمكن للوصول إلى
البييض. والأقسام التي قمت بتمشيطها يجب أن تظل
منفصلة عن الأقسام التي لم يتم تمشيطها بعد.

4 نظّف المشط بعد كل حركة من المشط في الشعر. إذا
باعدت أسنان المشط عن بعضها البعض بحرص
عندما تمسك بالمشط تحت الماء الجاري فإن كل القمل
والصئبان سيختفي.

5 قم بتعقيم NitFree بعد انتهائك من التمشيط وذلك
بغلي المشط في ماء ساخن لمدة دقيقة واحدة. لا تنس
تنظيف جميع الأمشاط أو الفرشاة الأخرى التي كنت
قد استخدمتها.

كرّر الإجراء السابق ذكره يوميا إلى أن تتخلص من جميع القمل
والصئبان. بعد انتهائك من العلاج، نوصي أن تواصل التمشيط باستخدام
NitFree بانتظام لاكتشاف المشكلة مبكرا وللحيلولة دون انتشار القمل
إلى حد أبعد.

عندما تقوم بعلاج أحد أفراد الأسرة من القمل لا تنس التحقق مما إذا كان
سائر أفراد الأسرة مصابين أيضا حتى يتسنى للجميع العلاج في نفس
الوقت.

www.LusFri.nu

NitFree متاح للبيع في متاجر الصحة ذات المخزون الجيد من
السلع وفي الموقع الإلكتروني www.LusFri.nu

للحصول على مزيد من المعلومات وعلى تعليمات المستخدم
بلغات أخرى، يرجى زيارة www.LusFri.nu أو إرسال
رسالة إلكترونية إلى: info@lusfri.nu.

يتم تسويقه في الدول الاسكندنافية من قبل:

LusFri

Tutviksvägen 15
136 75 Haninge
Sweden
السويد

هاتف: 503 3436 - 73 (0) 46+4

www.LusFri.nu