

شپش موي سر؟

يك 'LusFri.nu' بشويد

كنترل كنيد- از بين بردن و زدودن شپش موي سر را با خارج ساختن تخمهاي آن شروع كنيد



www.LusFri.nu

شانه نيت فري در فروشگاه هاي بهداشتي با مازاد خوب و متنوع براي فروش موجود است و همچنين مي توانيد سايت www.LusFri.nu را ببينيد.

براي اطلاعات بيشتر و دستورالعملهاي استفاده به زبان هاي مختلف, از سايت www.LusFri.nu ديدن كنيد يا با ايميل info@lusfri.nu تماس بگيريد.

در كشورهاي شمالي (نرديك) براي فروش عرضه شده توسط:

LusFri

Tutviksvägen 15
136 75 Haninge
Sweden سوئد

تلفن: +46 (0)73-503 3436

www.LusFri.nu

اين چگونگي استفاده از شانه نيت فري است

از نيت فري در حمام استفاده كنيد تا بتوانيد به آساني شانه را زير آب روان بين هر بار شانه كشيدن تميز كنيد.

1. موها را خشك نگهداريد, با آنها را كمی خيس كنيد تا الكتريسيته ساكن آنها كاهش يابد.

2. از يك شانه معمولي يا برس براي مرتب كردن موها استفاده كنيد و پيچيدگي هاي آنها را صاف كنيد.



3. موها را به بخشهاي كوچكي تقسيم كنيد و با احتياط و دقت شانه نيت فري را ازروي هر بخش بكشيد. نگاه كنيد كه با هر بار كشيدن شانه چه چيزهايي از موها بيرون مي آيد. شما اگر شانه را مقابل يك كاغذ سفيد يا آينه تكان دهيد بهتر مي توانيد اين چيزها را ببينيد. اين مسئله خيلي مهم است كه از نزديك قسمت فرق سر شانه كنيد تا تخمها را از موها جدا كنيد. بخشهايي كه شما شانه کرده ايد بايستي از بخشهايي كه هنوز شانه نكرده ايد جدا داشته شوند.



4. شانه را بين هر بار كشيدن شانه تميز كنيد اگر شما با دقت دندانهاي شانه را هنگامي كه شانه را زير آب روان نگاه داشته ايد جدا و تميز كنيد, همه شپش ها و تخمها خارج خواهند شد



5. شانه نيت فري را بعد از تمام شدن شانه كردن با جوشاندن در آب داغ به مدت 1 دقيقه استريليزه كنيد. ولي فراموش نكنيد كه شانه ها و برس هاي ديگر را هم كه استفاده کرده ايد تميز كنيد.

اعمال بالا را هر روز تكرر كنيد تا شما از همه شپش ها و تخمهاي آنها خلاص شويد. بعد از تمام كردن معالجه, ما توصيه مي كنيم كه به شانه كردن با نيت فري بطور منظم ادامه دهيد تا مشكل را در اسرع وقت كشف كنيد و از گسترش بيشتر شپش موي سر جلوگيري كنيد.

موقعي كه شما فري را در خانواده معالجه مي كنيد فراموش نكنيد كه بررسي كنيد كه آيا اعضاي ديگر خانواده هم به اين عارضه مبتلا شده اند تا هر كسي بتواند در همان موقع معالجه شود.

ارزش خوب و مناسب براي پول و استحکام محصول.
توصيه شده براي افراد داراي آلرژي

نيت فري- شانه ضد شپش با شيارهاي ريز مخصوص براي زدودن تخمها و شپش ها بطور همزمان.

چرا من بایستی از نیت فری استفاده کنم؟

امروزه محصولات و مواد زیادی در بازار و مارکت ها برای از بین بردن و مبارزه با شپش موی سر موجود است، اما آنها همیشه در مبارزه با تخمها ی شپش موثر نیستند. بدین معنی که معالجه شپش موی سر باید شامل چندین مرحله معالجه باشد که در مدت زمان طولانی تری اعمال بشود. استفاده از نیت فری که هم برای مبارزه با شپش موی سر و هم تخمهای آنها عرضه می شود چرخه زندگی بیولوژیکی شپش ها را بهم می زند. با استفاده از این مواد شانس برای بقا و رشد و تبدیل شده به شپش ندارند و نمی توانند چندبرابر بشوند و افزایش یابند. در این صورت مدت معالجه می تواند بطور قابل ملاحظه ای کوتاه شود.

آژانس مواد و محصولات پزشکی تاکید می کند که اهمیت شانه کردن با یک شانه با دندانهای مناسب می تواند شپش موی سر را معالجه کند. یک مطالعه دریک ژورنال پزشکی انگلستان نشان داده است که شانه کردن موی سر می تواند چهاربار از استفاده از مواد ضد شپش موی سر موثرتر باشد.

چیزی که نیت فری را از شانه های دیگر که دارای دندانهای و شیارهای بسیار ریزی هستند جدا می کند اینست که هم شپش و هم تخم آنها را در همان موقع شانه و از سر دور می شوند. استفاده از شانه سنتی ضد شپش ، اغلب مشکل است که تخم ها را از رشته های مو که به آنها مانند چسب چسبیده اند جدا کرد. فاصله بین دندانهای شانه نیت فری کمتر از 0/2 میلیمتر است که حتی کوچکترین شپش ها و تخم ها با شانه کردن از سر جدا و خارج می شوند.

نیت فری از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. آن پوشش سخت و بادوامی دارد و می تواند همراه با مواد معالجه کننده شپش موی سر بدون صدمه دیدن مورد استفاده قرار گیرد. هم شکل و هم ظاهر آن برای استفاده مکرر مناسب هستند، چون نیت فری طراحی فوق العاده و پیشرفته ای با استفاده از تکنولوژی لیزری دارد. شانه می تواند استریلیزه شود و توسط همه افراد خانواده بدون ریسک گسترش این عارضه مورد استفاده قرار گیرد.

اخیرا ، گزارشهایی بدست آمده که نشان می دهند معالجات شیمیایی باعث مقاومت پوشش تخم های شپش ها می شود در حالی که شانه کردن با نیت فری چنین عوارضی ایجاد نمی کند.

جزئیات منحصر بفرد نیت فری

محکم و بادوام است و می تواند استریلیزه شود

از فولاد ضد زنگ ساخته شده ، هم فرم و ظاهر خود را نگه می دارد.

نوار لاستیکی برای گرفتن بهتر این شانه حتی اگر، دستهای شما خیس و صابونی باشد لیز نمی خورد.

دندانهای دراز شانه

بهتر به ته موها می رسد. شپش های بیشتر و تخم های آنها می توانند با هر حرکت شانه از موها جدا شده و از سر خارج بشوند.


فاصله نزدیک بین دندانهای شانه

حتی کوچکترین تخمها و شپش ها هم هنگام شانه کردن از موها جدا و از سر خارج می شوند.



شیارهای مخصوص ریز

تخمها وقتی که صدمه می بینند در همان موقع از موها دور و جدا می شوند. طراحی مناسب و با ارزش شیارهای ریز و انتهای گرد برای اینست که نه موهای سر نه فرق سر در حین شانه کردن صدمه نمی بینند.

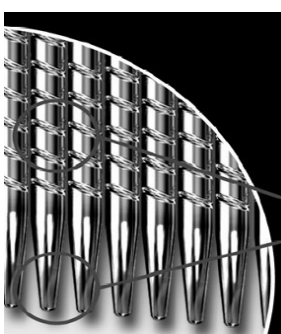

نظر مشتریان در مورد نیت فری

ما حالا برای ماهها با ورمین – با ناامیدی مبارزه کرده ایم... وقتی که من(به عنوان فروشنده و صاحب مغازه) این تقدیر را می خوانم که من فکر کردم خوب خواهیم دید! چه تقدیری.....” می توانم از تجربه های خود بریتان بگویم: آن کار می کند! ما شانه کرده ایم و شانه کرده ایم و شانه کرده ایم! حالا می توانیم تخم ها راکه قبلا به صورت بیمارگونه و تیداری می خواستیم توسط انبرک ها دور و جدا کنیم. فقط با یکبار کشیدن شانه می توانیم انجام بدهیم. اگر شما شخصی هستید که این مطلب را می خوانیدو این شانه را ندارید، بهترین توصیه من به شما اینست که آن را بخرید.”

سوفی، مادر دو بچه با ”موهای پرپشت”

”سلام، من فقط می خواهم بنویسم و از شما برای تهیه این شانه فوق العاده تشکر کنم! بعد از حدود دو هفته استفاده از شانه خود، ما کاملا از شر شپش ها خلاص شده ایم. من در اول کمی مردد بودم که آیا این شانه در موهای پرپشت عملکرد خواهد داشت، اما آن خیلی خوب عمل کرد. من تقریبا فکر می کنم که نیت فری برای استفاده خیلی بیشتر از شانه های ساده و معمولی بهتر است.”

تانجا، مادر دو بچه – هردو با موهای پرپشت

” ما در مدت 3 روز از شپش های خود خلاص شدیم و استفاده از معالجات شپش را متوقف کردیم. ما خیلی خوشحال هستیم و از این شانه راضی هستیم. همیشه خوب است که راه حلی برای مشکل در خانه داشته باشیم.”

پر، پدر سه بچه